

商品企画書

2009年新発売

■ ニコンが開発！高品質で、しかも低価格「新開発の補聴器」 「はっきり聞こえる」耳あな型かんたん補聴器



Nikon
耳あな型レディメイド補聴器
イヤファッション
NEF-05

■ ご好評な販売促進企画案・・(参考案として)

1. ニコンからお手頃な価格で2009年新発売です
2. お世話になったおじいちゃん、おばあちゃんへのプレゼント
3. 敬老の日[9月21日(月)]、勤労感謝の日[11月23日(月)]
4. 帰省時の「元気で長生きで賞」などとしてプレゼントに
5. お誕生日、結婚記念日のプレゼント
6. 還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿、卒寿祝い等に
「元気で長生き」長寿の秘訣などとして

■ なぜ補聴器が必要？

1. 一般的に50歳を過ぎたあたりから高音域が若い方より聞こえにくくなる傾向があります
2. 視力補強のメガネと同様、聴力を補聴器で補うことで自然の音や、より多くの方との会話が楽しめます
3. 聴力を補聴器で補うことで毎日をより楽しく、喜怒哀楽をより多く取り入れることで老化を遅らせる工夫の1つにもなります
4. 現在は200人に1人の割合でご利用ですが、今後の需要見込みとしては高齢化社会も影響して20人に1人の割合が予測されています

■ こんな方にご好評です

1. 聞こえにくくなった初歩の方へ[軽度難聴用補聴器]
2. テレビのボリュームが最近大きい方へ
3. 最近「なに？」と問い返す回数が増えた方へ
4. 「会話に入れない瞬間を見るようになった」方へも
5. 病院や銀行などで呼ばれても聞き逃すようになった

■ 販売時の注意事項 (詳細はご相談ください)

1. 補聴器は特定管理医療機器です。
2. 販売に当っては事前に基礎講習受講した営業管理者設置1人が必要です
3. 受講後、都道府県業務課へ届出ください。詳細は業務課へご確認ください
4. 販売価格は維持願います(オークション不可、ディスカウント不可)
(アフターの伴う商品です。適正利益を確保くださるようお願いいたします)
(空気電池プレゼントやポイント月間などの販促にて対応願います)

■ 特徴

1. 小型で耳穴へピッタッとくる、しかも肌色！⇒ だから目立ちにくい！
2. どちらの耳にも使用可能な左右共通の兼用タイプ！⇒ だから取り扱いが簡単
3. 装着しやすい、持ちやすい形状を重視！⇒ だから、使いやすい、落としにくい
4. 一流メーカーニコン⇒ だからこだわる日本語の聞き取りやすい母音強調の音響設計
・ことばとして西洋語は子音強調、日本語は母音強調の特性があります
5. ご自身で音量調整が出来る⇒ だからボリュームでシーンに合わせた音量へ調整も可能
6. 耳穴のサイズに合わせやすいシリコン製耳せんS、M、Lの3サイズ入り(Mは本体装着済)
7. トラベルにも便利なハードケースそして、テスト用PR41空気電池1個、クリーニング用ブラシも付属



NEF-05装着時

W11.6×H17.5×D19.5mm



NEF-05実物大相当



■ メーカーのサポートは万全です

- * ご購入後の取扱や調整方法、不具合についての問い合わせ
- * 修理状況確認、アフター内容などの問い合わせ

◆ イヤファッション専用

コールセンターを設置しております。
専用フリーダイヤル：お客様サポートセンター

0120-337-146 (月～金の9:30～17:30、土日祝休み)

不具合品返送先 (株) ミック ニコン流通係

※別途、返送確認書をFAX送信後、対応ください

(理由：お客様、販売企業様等の確認モレ防止のため)
住所、TEL：同上



■ ご使用方法

1. お取扱はかんたん！ お手元に到着したその日からご使用可能
2. ご利用手順
 - 1) 電池をセットする
 - 2) 音量を最小の状態ですぐに耳穴へ入れる
 - 3) ボリューム調整をする
3. 空気電池PR41は連続24時間使用の場合で通常8日間前後ご利用できます
[* 電池の使用条件、気温などによって変動します。動作確認用のテスト用空気電池1個付属]

商品概要

よくある質問(Q&A)

- Q1. 視力と同様、聴力も補聴器をつけることで早く低下するのでは？
A1. 聴力に合わせた音量にボリュームを調整し、正しく使用すれば問題ありません。視力も同様です
- Q2. 価格が安い補聴器はハウリングというピーピー音がするのでは？[同梱の取扱説明書・記載内容]
A2. 耳と耳せんとの間にすき間が有る場合または、ボリュームが大きすぎる場合に発生しやすいようです
対応策：耳せんのサイズを交換してみる。または、ボリュームをやや小さめにしてご使用ください
※両耳への補聴器利用でボリュームを少し小さめすることも併せてご検討ください
- Q3. 使用して半年程度で聞こえなくなった。故障したのでは？[同梱の取扱説明書・記載内容]
A3. 本体の音孔部に耳あかが詰まっている場合が多いようです。付属のブラシで掃除をしてください
耳せんの孔が詰まっている場合もあります。交換してご使用ください [耳せんは消耗品扱いとなります]
電池が消耗している場合があります。電池交換をしてご使用ください [電池は消耗品扱いとなります]
[※空気電池はシールをはがした後は、電池だけ別に保管しても一定期間過ぎると寿命が終了します]
◆上記内容でも不具合の場合はニコンお客様サポートセンターへ一度確認のお電話をお願いします

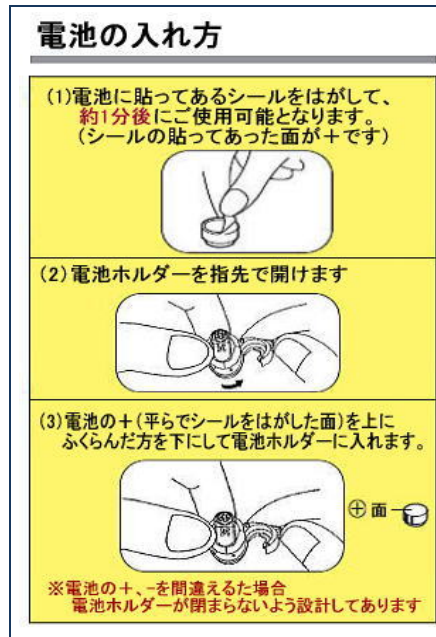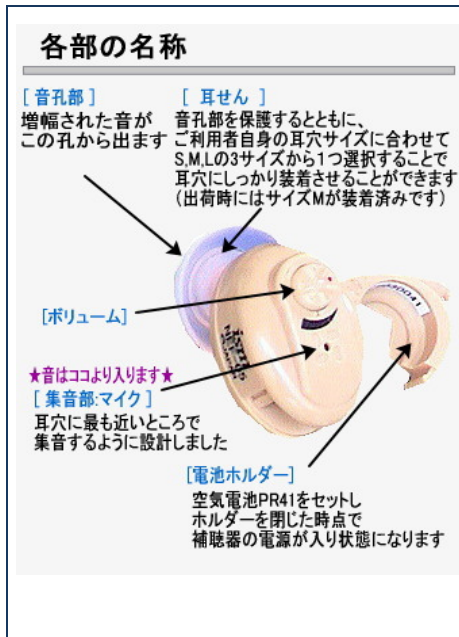

仕様及び付属品等の概要

適応難聴度	：軽度難聴度	重量	：約2.3g(電池含む)
本体サイズ	：W11.6×H17.5×D19.5mm	電池寿命	：約207時間
使用電池	：P R 41 (312)		
最大音響利得	：33dB±5dB		
90dB最大出力音圧レベル	：110dB±5dB	ピーク値	：115dB以下
材質	：本体：ABS樹脂、耳せん：シリコンラバー		
付属品	：携帯用ハードケース、耳せん（S、M、L、各1個） ：空気電池P R 41 (312) 1個、クリーニング用ブラシ、取扱説明書、保証書		



■商品の特性

規準周波数	：1600Hz
最大音響利得	：33dB±5dB
90dB最大出力音圧レベル	：110dB±5dB
ピーク値	：115dB以下
等価入力雑音レベル	：30dB以下
全高調波ひずみ	：500Hz 5%以下 ：800Hz 5%以下 ：1600Hz 5%以下
電池電流	：0.8mA
使用電池/電池寿命	：空気電池 PR41/約207時間
適応難聴度	：軽度
本体の大きさ	：W11.6×H17.5×D19.5
電撃保護	：内部電源機器 B形装着部
使用温湿度（使用環境）	：5～40℃ 30～85%RH
保管環境	：-10～50℃ 30～90%RH

※エリア別発送手数料、南東北、関東、信越、北陸、中部【735円】北東北、関西、中国、四国、【945円】北海道、九州【1050円】、沖縄離島【1260円】を含む